

HAIR SHAMPOOING MACHINE

Model	Size (LxDxH / mm)	Remark
HL-HSMT9710-1	420x730x920	Tank

- Stainless steel 304 polished frame and handle
- FRP wash bucket, rotatable and height adjustable
- Tank capacity: 36 l
- Water heating function: 1Kw/hr
- Motor pump: 1/8HP, water proof
- Water temperature: 40℃ (± 1℃), Temperature controller
- Power: 220V 50/60hz
- Control panel: On/Off switch, Temperature controller, Heating switch, Heating lamp, Power lamp, Pump switch, Pump lamp
- Rubber bumper against wall
- Hand spary with one touch button
- Drain valve
- Power cord 4m
- Four 4" ball bearing casters, two with locking brakes
- Accessories : Hair Dryer, Water Bucket, Head Rest



Acquired Intellectual Property

Accessories




Shower & Wash basin



Hair dryer



Drain valve

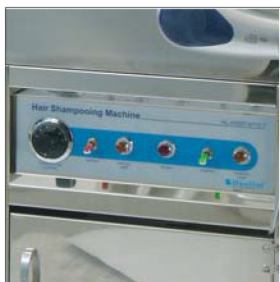

Control panel



헤어샴핑기로 머리 감기는 장면

Features & Usage

1. Water storage capacity is 36liters possible to wash hairs 2-3 people
2. This machine has water heating & control facilities can supply stability tempered water
3. Attaching hair dryer to dry hair
4. Selected casters which proof against rust & mobility
5. Water saving shower head installed

특징 및 용도

1. 본 기기의 최대담수 능력은 36리터로서 물탱크에 만수시겼을시 2~3명까지 머리세척이 가능하다.
2. 기기 자체에 히팅 장치가 장착되었으며 온도조절장치가 부착되어 일정한 온도를 유지시켜주어 환자 및 사용자에게 쾌적함을 제공한다.
3. 머리 세척 후 즉시 건조할 수 있도록 헤어드라이기가 부착되어 있다.
4. 녹이 슬지 않는 바퀴가 장착되어 있으며 사용하고자 하는 장소로 이동하기 위한 설치가 편리하게 되어있다.
5. 샤워기 헤드에 잠금장치가 부착되어 절수효과가 뛰어나며 적은양의 물로서 머리를 감을 수 있다.

- Mobile hair shampooing machine is designed for shampooing and drying to unmovable patients and handicaped people's hair beside of bed.
- This machine can supply the sanitary service and refreshing to the patients. Also bring convenience and saving times to nurses and attendants.
- Both of patients and nurses can have better qualified services and helpful treatments.
- Hair shampooing machine 은 장기간 입원 환자 및 이동이 불가능한 환자를 침대결에서 모발 세척 및 건조까지 할 수 있도록 하여 환자에게 쾌적감과 안락감을 주며 간호사에게는 편리함과 시간절약의 효과를 주어 보다 양질의 간호서비스를 제공할 수 있으므로 환자의 치료에 간접적인 효과를 거둘 수 있습니다.